



ADAP'TABLE

LE MOUVEMENT À VOTRE MESURE



A

B

C

D

E

Lève patient sensible : Line et Line + Le dispositif à colonne polyvalent avec assistance motorisée

Line et Line+ sont des lève-patients passifs. Grâce au mouvement de levage linéaire, totalement vertical de la colonne, le patient peut être positionné avec beaucoup de précision. Les deux lève patients sont dotées d'une barre de suspension électrique à 4 points pour déplacer le patient confortablement de la position assise à la position couchée ou sur le dos.

Les dimensions du lève patient **Line+** dotée d'un piètement long et bas, garantissent aux patients d'être toujours placés suffisamment à l'écart d'un lit ou d'un fauteuil roulant.

Le design du lève patient **Line** est plus compact. Il est plus adapté pour les espaces restreints.

Le système de motorisation sensible breveté permet de se déplacer avec une force minimale quelle que soit la direction. Le capteur de force présent dans la poignée capte la manière dont le dispositif est poussé et traduit ces informations pour l'orienter dans la bonne direction et adapter la vitesse de la roue électrique située sous le lève patient. Le niveau faible de force requis permet de prévenir les blessures physiques causées par les efforts de poussée et de traction. La commande intuitive garantit un temps d'apprentissage minimum.


Line et Line+ sont équipées d'une batterie NiMH intégrée avec un chargeur. La très grande capacité de la batterie garantit une utilisation permanente du lève patient.

ADAP'TABLE

15 chemin des Eglantiers – ZA la Ronze – 69440 TALUYERS

Tél. : 04 78 48 13 26 – Fax : 04 78 19 33 90

E-mail : contact@adap-table.com – Site : www.adap-table.com

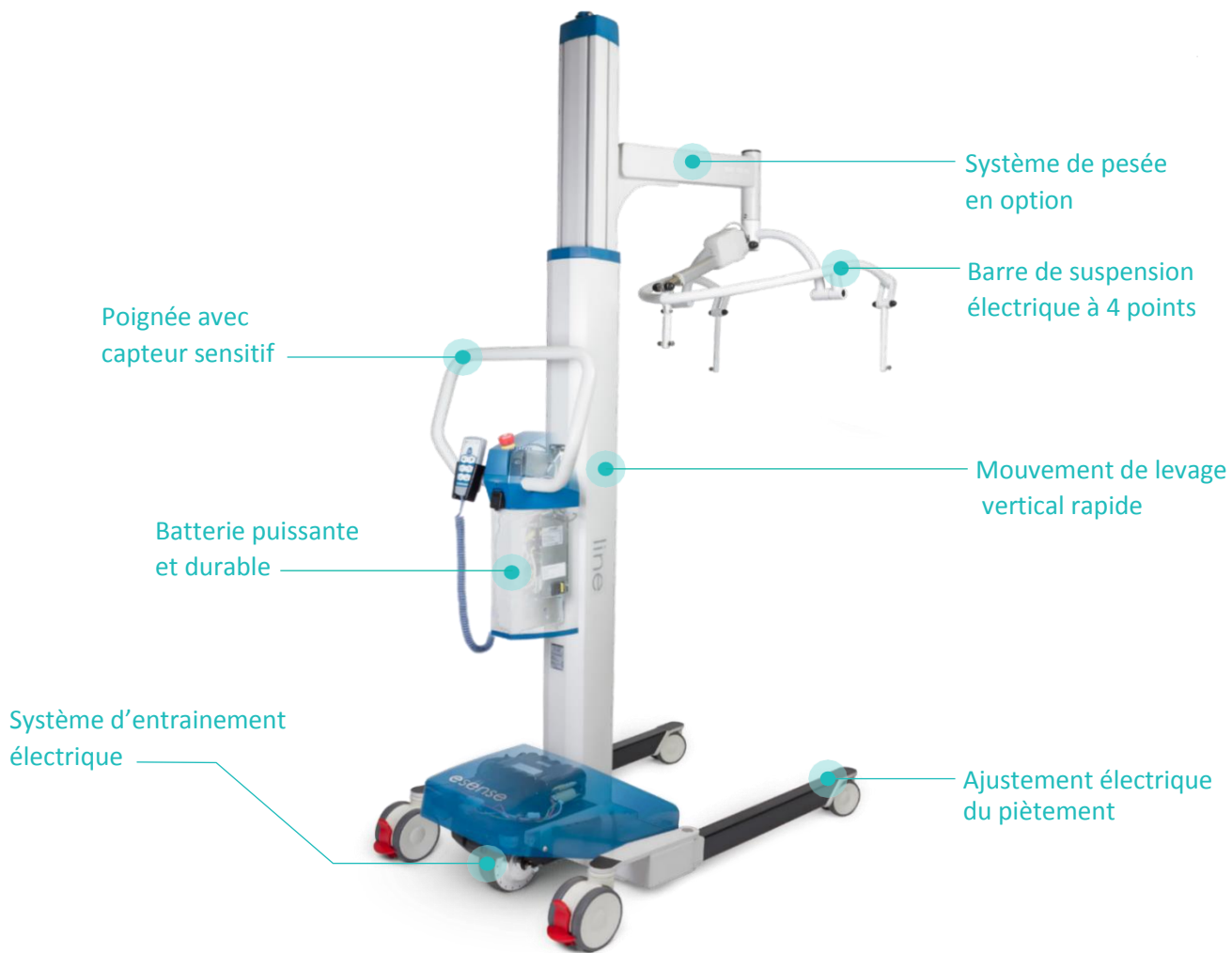

Caractéristiques	Line	Line+
Capacité de levage	150 kg	175 kg
Longueur du piètement	100 cm	120 cm
Hauteur du piètement	11,5 cm	11,5 cm
Largeur maximale piètement fermé	68 cm	74 cm
Largeur maximale piètement ouvert	103 cm	127 cm
Variation de l'élévation	130 cm	130 cm
Déport horizontal	55 cm	72 cm
Indice de protection	IPX2	IPX2
Type de batterie	NiMH	NiMH
Tension et capacité de la batterie*	24V 9Ah	24V 9Ah
Nombre moyen de transferts avec une batterie à pleine charge	78	78
Durée de vie garantie de la batterie en cycles de charge	500 x	500 x

* Line et Line+ existent également sans le système d'entraînement. Ces versions sont équipées d'une batterie d'une capacité inférieure.